

Cobalt X™

Enregistreur équipé de LoRaWAN pour DicksonOne

Ce guide de démarrage rapide présente la procédure à suivre pour mettre en opération l'enregistreur Cobalt X1 ou Cobalt X2 sur votre plateforme de surveillance DicksonOne.

Prérequis : Avant d'ajouter un enregistreur Cobalt X à votre compte DicksonOne, il est nécessaire de configurer une passerelle Dickson compatible LoRaWAN.

Vous pouvez ensuite [inscrire l'enregistreur](#) dans DicksonOne pour consulter les données en ligne, configurer les alarmes, et bien plus encore.

La documentation complète est disponible sur notre site web :

<https://dicksondata.com/fr-fr/support-technique-dicksonone>

Consignes de sécurité



Les instructions de sécurité sont disponibles en téléchargement depuis le site web Dickson. Utilisez ce code QR pour accéder au document.



Fourni avec le produit

- Enregistreur Cobalt X ou Cobalt X2
- Deux piles au LS17500 3,6 V
- Antenne
- Kit de montage
 - Support de montage avec aimant
 - Attaches et crochets adhésifs pour le rangement des câbles

Remarque : L'enregistreur Cobalt X peut fonctionner sur piles ou à l'aide d'un adaptateur 5 V AC avec un câble micro-USB. Nous recommandons d'utiliser les deux types d'alimentation afin de prolonger la durée de vie des piles et d'assurer l'enregistrement continu en cas de coupure de courant.

Étape 1 : Activer l'enregistreur

1. Retirez la languette en plastique du couvercle du compartiment à piles pour activer les piles, et/ou branchez le câble d'alimentation USB dans l'enregistreur.
2. Une fois l'enregistreur démarré, appuyez sur l'écran tactile pour sélectionner DicksonOne Cloud.
3. Si votre passerelle Dickson LoRaWAN est correctement configurée, la communication avec votre plateforme sera établie en une minute environ et un code d'enregistrement s'affichera à l'écran :

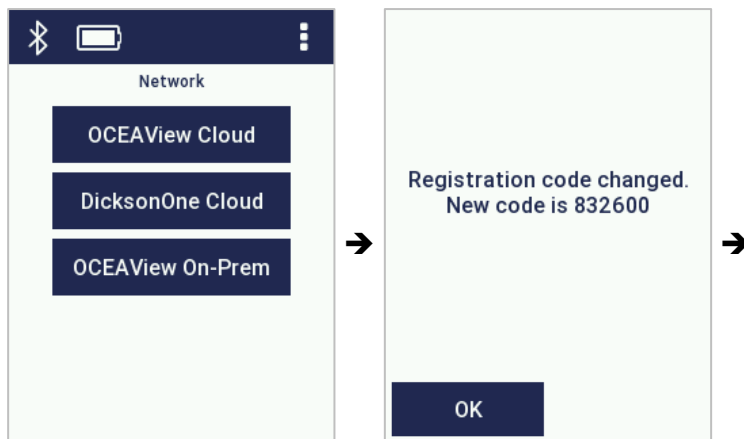


Figure 1 – Votre code d'inscription s'affiche peu après l'établissement de la connexion.

N.B. : ces écrans sont affichés en anglais lors du premier démarrage. Vous pouvez changer la langue à tout moment.

4. Notez le code à saisir ensuite dans DicksonOne, puis appuyez sur **OK**. Le code d'enregistrement reste accessible via le menu, sous **Paramètres** → **Informations** → **Plus**.

Étape 2 : Inscription de l'enregistreur sur DicksonOne

1. Connectez-vous à votre compte DicksonOne, et cliquez sur **+ Inscrire un nouveau matériel** en haut à droite de l'écran.
2. Cliquez sur **Ajouter un enregistreur DicksonOne**.

The image shows a screenshot of the 'Inscrire l'enregistreur' (Register device) form. The form has three tabs: 'Enregistreur DicksonOne', 'Enregistreur tiers', and 'Ancien e...'. The 'Enregistreur DicksonOne' tab is active. The form contains the following fields: 'Nom de l'enregistreur *' with the value 'X2 - Lab 3 - 115'; 'Code d'inscription *' with the value '486344'; and 'Emplacement *' with a dropdown menu showing 'Lab Science' and a button 'Ajouter un nouvel emplacement'. Below these fields are 'Paramètres de l'enregistreur' with 'Company Default' and a 'Modifier' link. At the bottom is a blue button labeled 'Inscrire l'enregistreur'. A yellow callout box with an arrow pointing to the 'Code d'inscription' field contains the text 'Saisissez le code d'inscription ici'.

Figure 2 – Saisissez le code d'inscription et les autres informations pour l'inscription.

3. Saisissez un nom et le code d'inscription, puis sélectionnez un emplacement à l'aide du menu déroulant.
4. Cliquez sur **Inscrire l'enregistreur**. L'enregistreur est ajouté à votre plateforme comme indiqué ci-dessous.

Appareils récents		
Enregistreur	Emplacement	Afficher le fuseau horaire
X2 - Lab 3 - 115 - EB0C000EB51B	Lab Science	Paris

Figure 3 – Confirmation de l'inscription de l'enregistreur.

5. Vous pouvez cliquer sur le nom de l'enregistreur pour accéder à l'appareil et effectuer des réglages supplémentaires selon vos besoins, tels que la définition des seuils d'alarme, des politiques de notification, etc.

L'enregistreur apparaît dans le tableau de bord. Les données commenceront à être transmises automatiquement au système dans un délai maximum de dix minutes.



Figure 4 – Accédez à l'enregistreur via le menu Points de Contrôle dans DicksonOne.

Nous vous invitons à prendre connaissance de la documentation DicksonOne afin de tirer le meilleur parti de vos produits Dickson.



Dickson Europe

Montpellier – France
+33 499 13 67 30
contact@dicksondata.fr

Dickson Amérique du Nord

Addison, IL – USA
+1 (630) 543-3747
contact@dicksondata.com

Dickson Asie-Pacifique

Petaling Jaya – Malaisie
+603 749 40758
contact@dicksondata.my

©2026 Dickson. Tous droits réservés. Dickson, le logo Dickson, DicksonOne et Cobalt X sont la propriété exclusive de Dickson. Toutes les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ce document est non contractuel. Les photos et les caractéristiques des produits peuvent varier.