

Cobalt XS™

Enregistreur équipé de LoRaWAN pour DicksonOne

Ce guide de démarrage rapide présente la procédure à suivre pour mettre en opération l'enregistreur Cobalt XS avec votre plateforme de surveillance DicksonOne.

Prérequis : Avant d'ajouter un enregistreur Cobalt XS à votre compte DicksonOne, il est nécessaire de configurer et une passerelle Dickson compatible LoRaWAN.

Vous pouvez ensuite [inscrire l'enregistreur](#) dans DicksonOne pour consulter les données en ligne, configurer les alarmes, et bien plus encore.

La documentation complète est disponible sur notre site web :

<https://dicksondata.com/fr-fr/support-technique-dicksonone>

Consignes de sécurité



Les instructions de sécurité sont disponibles en téléchargement depuis le site web Dickson. Utilisez ce code QR pour accéder au document.



Fourni avec le produit

- Enregistreur Cobalt X ou Cobalt X2
- Pile Lithium 3,6V
- Antenne
- Kit de montage avec plaque murale (aimantée) et Velcro®

Étape 1 : Activer l'enregistreur

1. Retirez le couvercle et insérez la pile, en veillant à respecter la polarité indiquée (+/-).
2. Fixez l'antenne et connectez une sonde Dickson compatible avec l'enregistreur.
3. Une fois l'enregistreur de données démarré, appuyez sur le bouton gauche ou droit (◀ ou ▶) sélectionner **DicksonOne Cloud**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. Si votre passerelle Dickson LoRaWAN est correctement configurée, la communication avec votre plateforme sera établie en une minute environ et un nouveau code d'enregistrement s'affichera à l'écran :

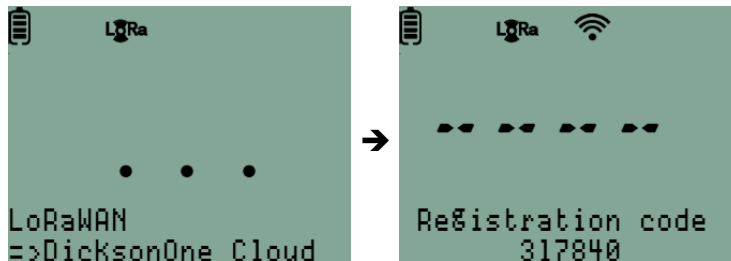


Figure 1 – Votre code d'enregistrement s'affiche peu après l'établissement de la connexion.

N.B. : ces écrans sont affichés en anglais lors du premier démarrage. Vous pouvez changer la langue à tout moment ultérieurement.

5. Notez le code à saisir ensuite dans DicksonOne, puis appuyez sur **OK**. Le code d'enregistrement est également accessible par un appui long sur **OK** depuis l'écran d'accueil pour entrer dans le menu → **OK** pour sélectionner **Informations** → bouton gauche (◀) pour accéder au code d'inscription.

Étape 2 : Inscription de l'enregistreur sur DicksonOne

1. Connectez-vous à votre compte DicksonOne
2. Cliquez sur **+ Inscrire un nouveau matériel** en haut à droite de l'écran
3. Cliquez sur **Ajouter un enregistreur DicksonOne**

Inscrire l'enregistreur

Enregistreur DicksonOne Enregistreur tiers

Nom de l'enregistreur *
XS - Lab 3 - 120

Code d'inscription *
486344

Emplacement *
Lab Science Ajouter un nouvel emplacement

Paramètres de l'enregistreur
Company Default Modifier

Inscrire l'enregistreur

Saisissez le code d'inscription ici

Figure 2 – Saisissez le code d'inscription et les autres informations pour inscrire l'enregistreur.

4. Saisissez un nom et le code d'inscription, puis sélectionnez un emplacement à l'aide du menu déroulant.
5. Cliquez sur **Inscrire l'enregistreur**. L'enregistreur est ajouté à votre plateforme comme indiqué ci-dessous.

Enregistreur	Emplacement	Afficher le fuseau horaire
XS - Lab 3 - 120 - EBOC000EB63D	Lab Science	Paris

Figure 3 – Confirmation de l'inscription de l'enregistreur.

6. Vous pouvez cliquer sur le nom de l'enregistreur pour accéder à l'appareil et effectuer des réglages supplémentaires selon vos besoins, tels que la définition des seuils d'alarme, des politiques de notification, etc.

L'enregistreur apparaît dans le tableau de bord. Après quelques instants, les données commenceront à être transmises automatiquement au système.



Figure 4 – Accédez à l'enregistreur via le menu Points de Contrôle dans DicksonOne.

Nous vous invitons à prendre connaissance de la documentation DicksonOne afin de tirer le meilleur parti de vos produits Dickson.



Dickson Europe

Montpellier – France
+33 499 13 67 30
contact@dicksondata.fr

Dickson Amérique du Nord

Addison, IL – USA
+1 (630) 543-3747
contact@dicksondata.com

Dickson Asie-Pacifique

Petaling Jaya – Malaisie
+603 749 40758
contact@dicksondata.my

©2026 Dickson. Tous droits réservés. Dickson, le logo Dickson, DicksonOne et Cobalt XS sont la propriété exclusive de Dickson. Toutes les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ce document est non contractuel. Les images et les caractéristiques peuvent varier.